

BOA Max 2 + 2 mankiety na kończyny górne + 2 mankiety na kończyny dolne



Boa Max 2 urządzenie do przeprowadzenia masażu pneumatycznego oraz **2 mankiety na kończynę górną** (prawy i lewy) i **2 mankiety na kończynę dolną** (prawy i lewy)

Cena: 19 722,22 zł

VAT: 0%

Oferta z dnia: 2020-01-26

BOA Max 2 + 2 mankiety na kończyny górne + 2 mankiety na kończyny dolne

Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego BOA Max 2 umożliwia przeprowadzanie zabiegów masażu pneumatycznego według piętnastu różnych algorytmów dla kończyn górnych i dolnych. Umożliwia przy tym dowolne kształtowanie wartości przebiegów ciśnienia poprzez funkcję korekcji dla każdej komory. Funkcja ta umożliwia ustawienie dowolnej wartości ciśnienia w każdej komorze mankietu uciskowego osobno.

To jedyny na świecie aparat do masażu pneumatycznego, posiadający specjalny algorytm przeznaczony do drenażu limfatycznego, którego przebieg jest zgodny z techniką manualnego drenażu limfatycznego (MDL) wg E. Voddera.

Aparat BOA Max 2 jest szczególnie polecany jako podstawowe wyposażenie każdego rehabilitacyjnego oddziału szpitalnego i sanatoryjnego, gabinetu rehabilitacyjnego, gabinetu odnowy biologicznej, gabinetów kosmetycznych, SPA

BOA MAX 2 to nowoczesny i zaawansowany technologicznie aparat do masażu limfatycznego przeznaczony w głównej mierze dla ośrodków rehabilitacyjnych i medycyny estetycznej. BOA MAX 2 posiada aż wstępnie zaprogramowane algorytmy zabiegowe (aż 21), dla których wystarczy podać jedynie wartość ciśnienia pracy. Urządzenie ma również specjalnie opracowany algorytm przeznaczony do drenażu limfatycznego techniką Emila Voddera oraz opcję masażu pulsacyjnego.

BOA MAX 2 wykorzystuje wysokiej jakości i bardzo wydajne pompy japońskie, które umożliwiają osiągnięcie krótkich czasów dopompowywania komór mankietu (już od 3 sekund) i wykorzystanie opcji pulsacji. Urządzenie BOA MAX 2 posiada wysokiej klasy mankiety uciskowe z zachodzącymi na siebie komorami (tzw. overlapping). W przypadku tego modelu stosuje się mankiety 12 i 24 komorowe. Wśród mankietów 12 komorowych rozróżniamy mankiety na kończynę dolną i górną, mankiety 24 komorowe obejmują spodnie na kończyny dolne i kurtkę na kończyny górne.

ZASTOSOWANIE



- **Fizjoterapia I Rehabilitacja**
- **Medycyna Sportowa**
- **Odnowa Biologiczna**
- **Spa**

ZALETY APARATU BOA 2 MAX:

- drenaż limfatyczny (2 specjalne algorytmy), masaż klasyczny i rewersyjny, opcja masażu pulsacyjnego
- stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego
- automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu,
- opcja awaryjnego odsysania umożliwiająca szybkie i skuteczne opróżnienie komór mankietu uciskowego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów bólowych u pacjenta lub pacjentki
- łatwa obsługa dzięki komunikacji poprzez wyświetlacz graficzny w języku polskim, lub angielskim (z możliwością wgrania dowolnej wersji językowej)
- szeroka gama wysokiej jakości mankietów uciskowych na kończyny górne oraz kończyny dolne
- kurtka uciskowa mająca zastosowanie w leczeniu obrzęków kończyn górnych po mastektomii oraz zabiegach kosmetycznych jak również spodnie uciskowe szczególnie przydatne przy masażach odchudzających i leczących cellulitis

Zalety masażu limfatycznego

Masaż ciśnieniowy BOA MAX 2 ma pozytywny wpływ na organizm pacjenta:


- Stymulacja przepływu żylnego i limfatycznego, co prowadzi do zwiększonego dostarczania tlenu i składników odżywczych do narządów.
- Szybsze usuwanie produktów metabolicznych, eliminacja objawów zastoju, wchłanianie obrzęków.
- Ułatwienie przepływu żył.
- Zmniejszenie oporu przepływu tętnicy, co ułatwia pracę serca.

- Poszerzenie naczyń krwionośnych i limfatycznych prowadzące do szybszego krążenia krwi.
- BOA MAX 2 wyposażony jest w najwyższej jakości mankiety z nakładającymi się komorami. Rozmiar każdego można zwiększyć za pomocą odpowiednich poszerzacze. W zależności od zabiegu dostępne są różne rodzaje mankietów (dla każdej części ciała).

Zastosowanie w medycynie estetycznej

Drenaż limfatyczny coraz częściej stosowany jest jako podstawowy oraz wspomagający zabieg w medycynie estetycznej. Do najważniejszych wskazań estetycznych należą:

- Cellulit.
- Zapobieganie powstawaniu żylaków.
- Obrzęk tłuszczowy.
- Zespół ciężkich nóg.
- Detoksykacja.
- Poprawa odżywienia skóry.

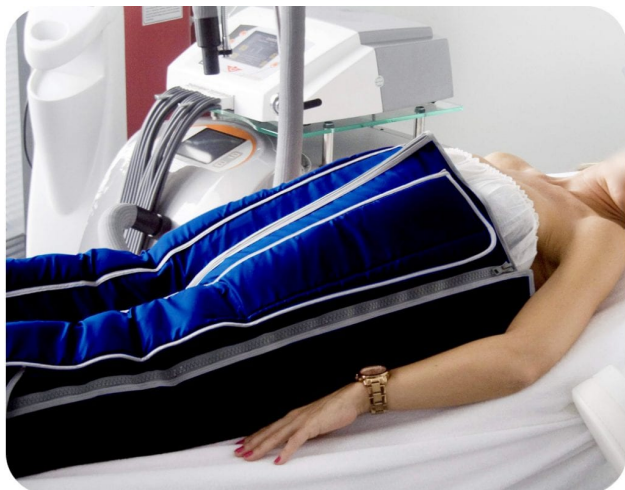

PARAMETRY TECHNICZNE

- regulowane ciśnienie w komorach mankietu od 20 do 140 mmHg, elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia
- masaż wykonywany na kończynach górnych lub dolnych, masaż klasyczny wstępujący i zstępujący oraz dwa rodzaje masażu limfatycznego prowadzonego techniką E. Voddera
- obsługiwana liczba komór: 12 w pojedynczym mankiecie, 24 w spodniach lub kurtce uciskowej
- niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu oraz korekcja ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie osobno
- awaryjne, jednoczesne odsysanie ze wszystkich komór mankietu uciskowego
- piętnaście algorytmów zabiegowych i regulacja wszystkich parametrów masażu
- wydajność pompy 28l / min. standardowy czas dopompowania komory około 3s.
- czytelny panel sterowania i intuicyjna obsługa aparatu
- ekran podpowiadający każdy etap programowania parametrów zabiegu
- pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu

Wskazania medyczne

Przewlekłe obrzęki.

- Niewydolność żylna.
- Stan po mastektomii.
- Choroba niedokrwienne kończyn dolnych.
- Otyłość.
- Limfopatie poplekowe.
- Neuropatia, neuralgia.
- Zespół Reynaud'a.
- Zaburzenia troficzne skóry.
- Choroba zwyrodnieniowa stawów - artroza.
- Dna moczowa, zapalenie wielostawowe.
- Zespół cieśni nadgarstka (przed-, pooperacyjny).

Zakres ciśnienia w masażu:	min. 20 mmHg, maks. - 140 mmHg
Maksymalny pobór mocy:	110VA
Strumień objętościowy pompy	25 l/min.
Liczba obsługiwanych komór:	12/24
wymiary	410 x 430 x 150 mm
masa urządzenia	10 kg
zasilanie	230V/50Hz (+/- 10%).